

Código: PROS1188	Edición: PROS1188	Fecha: 24/03/2022
Modelo: Larmisoft Yeux Secs		
Doc IU: DOC-DIS/0711	Edición: 3	FURIU: 2018/06
Ref Troquel: TRO-PROST-013		Dimensiones: 400 x 150 mm
Tríptico: NA		

Colores:







Aprobación:

Diseño y Comunicación	
29/03/2022	Isabelle Collot
Asuntos regulatorios	

PROS1188

Larmisoft DROGE OGEN

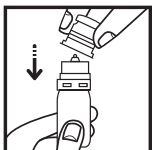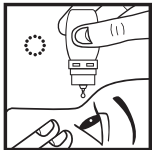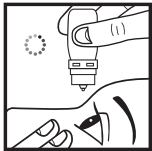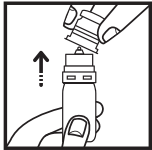

LUBRIFIËRENDE EN BEVOCHTIGENDE OOGOPLOSSING VOOR HET OOGOPPERVLAK.
Lubrifiërende oplossing voor contactlenzen. Lubrifiërende en bevochtigende oogoplossing voor het oogoppervlak en contactlenzen. Voor gebruik met of zonder contactlenzen. Zonder conserveermiddelen. Verlicht symptomen van lichte tot matige oogdroogte. Lubrifiërende druppels om de symptomen van lichte of matige oogdroogte te verlichten. Natriumhyaluronaat 0,20%. Hypotone oplossing.

OOGHEELKUNDIGE EN HYPOTONE OPLOSSING GEÏNDICEERD VOOR HET VERLICHTEN VAN SYMPTOMEN VAN LICHT OF MATIGE OOGDROOGTE.

BESCHRIJVING:
LARMISOFT Droge ogen is een lubrifiërende, hypotone en multidosis oogoplossing zonder conserveermiddelen met een combinatie van bevochtigende polymeren (natriumhyaluronaat, povidon en glycerine) en essentiële elektrolyten, bedoeld om de symptomen van lichte tot matige oogdroogte te verlichten en die compatibel is met alle contactlensmaterialen.

SAMENSTELLING:
Natriumhyaluronaat 0,20 g, glycerine, povidon, natriumchloride, magnesiumchloride, kaliumchloride, calciumchloride, boorzuur, borax decahydraat en gezuiverd water 100 ml.
ZONDER CONSERVEERMIDDELEN.

GEBRUIK:
LARMISOFT Droge ogen is aangewezen voor:

- Langdurige verlichting van de symptomen van lichte tot matige oogdroogte en andere ongemakken, zoals steken, jeuken, branden, vermoeide ogen of het gevoel dat er iets in het oog zit. Deze ongemakken worden onder andere veroorzaakt door factoren zoals: stof, rook, droge omgevingen, airconditioning en langdurig gebruik van computers of het langdurig dragen van contactlenzen.
- Lubrifiërende oplossing voor contactlenzen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. Neem een fles **LARMISOFT Droge ogen**, draai de verzegeling linksom en verwijder de bescherm dop.
Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meermaals.





Gebruik met contactlenzen: breng één of twee druppels aan op het externe oppervlak van elke lens tijdens het dragen of voordat deze worden uitgenomen, of breng één of twee druppels aan op het interne deel van elke lens vóórdat deze in het oog worden geplaatst.
De bescherm dop na iedere toediening terugplaatsen.
Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag.

VOORZORGSMATREGELN:

- Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik het product niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.
- Nooit kraanwater gebruiken om het lenzendoosje of de lenzen af te spoelen.
- Als u oogirritatie of een bijwerking ondervindt, gelieve een specialist te raadplegen.
- Als de fles eenmaal is geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de punt van de fles niet met de ogen of enig ander oppervlak in aanraking komt, om besmetting te voorkomen.
- Niet in de fles knijpen met de bescherm dop erop.
- Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt, of wanneer de fles is beschadigd.
- Het product bij kamertemperatuur bewaren.
- Het product niet gebruiken na de vervaldatum.
- Na elk gebruik de fles zorgvuldig sluiten.
- Gebruik het product niet in combinatie met een farmacologische behandeling of enig ander product dat op het oogoppervlak wordt aangebracht, zonder eerst advies in te winnen bij uw arts / oogarts, omdat dit de werking van beide kan veranderen.

Datum van laatste herziening: 06/2018.
Larmisoft is een Febelcare-merk.

Larmisoft YEUX SECS

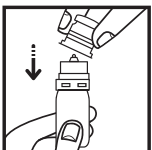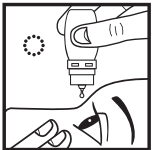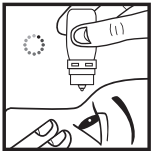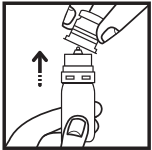

SOLUTION OPHTALMIQUE LUBRIFIANTE ET HUMIDIFIANTE DE LA SURFACE OCULAIRE.
Solution lubrifiante pour lentilles de contact. Solution lubrifiante et humidifiante de la surface oculaire et des lentilles de contact. Utilisation avec ou sans lentilles de contact. Sans conservateur. Soulage les symptômes de la sécheresse oculaire légère à modérée. Gouttes lubrifiantes pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire légère ou modérée.
Hyaluronate de sodium 0,20 %. Solution hypotonique.

SOLUTION OPHTALMIQUE ET HYPOTONIQUE INDIQUÉE POUR LE SOULAGEMENT DES SYMPTÔMES DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE LÉGÈRE OU MODÉRÉE.

DESCRIPTION :
LARMISOFT Yeux secs est une solution ophtalmique multidoses, lubrifiante, hypotonique et sans conservateur, à base d'une association de polymères « mouillants » (hyaluronate de sodium, povidone et glycérine) et d'électrolytes essentiels, destinée à soulager les symptômes de sécheresse oculaire légère ou modérée et compatible avec tous les matériaux des lentilles de contact.

COMPOSITION :
Hyaluronate de sodium 0,20 g, glycérine, povidone, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, acide borique, borax décahydraté et eau purifiée 100 ml.
SANS CONSERVATEUR.

USAGE :
LARMISOFT Yeux secs est indiqué pour :

- Soulagement important des symptômes de sécheresse oculaire légère ou modérée et autres gênes, tels que picotements, démangeaisons, sensations de brûlure, fatigue oculaire ou sensations de corps étrangers. Ces gênes sont causées par différents facteurs, tels que, entre autres : poussière, fumée, environnements secs, air conditionné et utilisation prolongée d'un ordinateur ou port de lentilles de contact.
- Solution lubrifiante pour lentilles de contact.

MODE D'EMPLOI :
Se laver et se rincer les mains puis les sécher avant utilisation.
Prendre un flacon de **LARMISOFT Yeux secs**, retirer le sceau de sécurité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlever l'embout de protection.
Utilisation directe : verser une à deux gouttes dans chaque œil et cligner

150 mm

400 mm

Código: PROS1188	Edición: PROS1188	Fecha: 24/03/2022
Modelo: Larmisoft Yeux Secs		
Doc IU: DOC-DIS/0711	Edición: 3	FURIU: 2018/06
Ref Troquel: TRO-PROST-013		Dimensiones: 400 x 150 mm
Tríptico: NA		

Colores:



Aprobación:

Diseño y Comunicación
Asuntos regulatorios





des yeux plusieurs fois.
Utilisation avec des lentilles de contact : appliquez une ou deux gouttes sur la surface externe de chaque lentille durant le port ou avant de les retirer, ou appliquez une ou deux gouttes sur la partie interne de chaque lentille avant de les placer sur les yeux.
Replacer l’embout de protection après chaque usage.
Utiliser le produit selon vos besoins, jusqu’à 8 fois par jour.

PRÉCAUTIONS :

- Ne pas ingérer la solution, et la garder hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit en cas d’allergie à l’un de ses composants.
- Ne jamais utiliser l’eau du robinet pour rincer l’étui à lentilles ou les lentilles.
- En cas d’irritation oculaire ou d’effet indésirable, consulter un spécialiste.
- Une fois le flacon ouvert, le délai d’utilisation est de 90 jours maximum.
- Assurez-vous que le bout du flacon n’entre pas en contact avec les yeux ou avec toute autre surface, afin d’éviter la contamination.
- Ne pas presser le flacon si l’embout de protection est en place.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est endommagé ou manquant, ou si le flacon est endommagé.
- Conserver le produit à température ambiante.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
- Bien refermer le flacon après chaque usage.
- N’utilisez pas le produit en association avec un traitement pharmacologique, ou tout autre produit qui est appliqué à la surface oculaire, sans consulter votre médecin/ophtalmologiste car l’action des deux produits pourrait en être altérée.

Date de la dernière révision : 06/2018.
Larmisoft est une marque Febelcare.

Larmisoft TROCKENE AUGEN

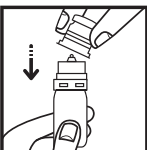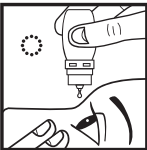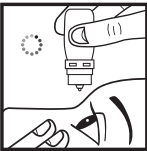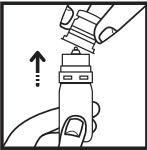

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE UND BENETZENDE AUGENLÖSUNG FÜR DIE AUGENOBERFLÄCHE.

Feuchtigkeitsspendende Lösung für Kontaktlinsen. Feuchtigkeitsspendende und benetzende Lösung für die Augenoberfläche und Kontaktlinsen. Zum Gebrauch mit oder ohne Kontaktlinsen. Ohne Konservierungsstoffe. Lindert die Symptome milder bis mäßiger Augentrockenheit. Feuchtigkeitsspendende Tropfen zur Linderung der Symptome milder bis mäßiger Augentrockenheit. Natriumhyaluronat 0,20 %. Hypotone Lösung.

HYPOTONE AUGENLÖSUNG, INDIZIERT FÜR DIE LINDERUNG VON SYMPTOMEN MILDER BIS MÄSSIGER AUGENTROCKENHEIT.

BESCHREIBUNG:

LARMISOFT Trockene Augen ist eine feuchtigkeitsspendende, hypotone Augenlösung ohne Konservierungsstoffe und in einem Mehrfachdosisbehälter mit einer Kombination aus benetzenden Polymeren (Natriumhyaluronat, Povidon und Glycerin) und wesentlichen Elektrolyten, die zur Linderung der Symptome milder bis mäßiger Augentrockenheit bestimmt ist und mit allen Kontaktlinsenmaterialien angewendet werden kann.

ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumhyaluronat 0,20 g, Glycerin, Povidon, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Borsäure, Boraxdecahydrat und gereinigtes Wasser 100 ml.

OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

LARMISOFT Trockene Augen ist indiziert für:

- Lang anhaltende Linderung der Symptome milder bis mäßiger Augentrockenheit und anderer Beschwerden wie Stechen, Jucken, Brennen, Augenmüdigkeit oder Fremdkörpergefühl. Diese Beschwerden werden durch verschiedene Faktoren ausgelöst, unter anderem durch Staub, Rauch, trockene Umgebungsluft, Klimaanlage sowie lange Bildschirmarbeit oder das Tragen von Kontaktlinsen.
- Feuchtigkeitsspendende Lösung für Kontaktlinsen.

ANWENDUNG:

Vor dem Gebrauch des Produktes die Hände waschen, abspülen und abtrocknen. Gegen den Uhrzeigersinn am Sicherheitssiegel einer Flasche LARMISOFT Trockene Augen ziehen und die Schutzkappe entfernen. Direkte Anwendung: Einen oder zwei Tropfen auf jedes Auge träufeln und mehrmals blinzeln. Verwendung mit Kontaktlinsen: Träufeln Sie wäh-

rend des Tragens oder vor dem Herausnehmen einen oder zwei Tropfen auf die äußere Oberfläche jeder Kontaktlinse oder träufeln Sie vor dem Einsetzen einen oder zwei Tropfen auf die Innenseite jeder Kontaktlinse. Nach jeder Verwendung die Schutzkappe wieder aufsetzen. Das Produkt nach Bedarf bis zu 8-mal täglich verwenden.

WARNHINWEISE:

- Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Produkt bei Allergien gegen einen der Bestandteile nicht verwenden.
- Den Linsenbehälter und die Linsen nie mit Leitungswasser abspülen.
- Wenn Nebenwirkungen oder Beschwerden auftreten, einen Spezialisten aufsuchen.
- Nach dem Öffnen der Flasche das Produkt maximal 90 Tage lang verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Flaschenspitze nicht mit den Augen oder anderen Oberflächen in Kontakt kommt, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Nicht auf die Flasche drücken, wenn die Schutzkappe aufgesetzt ist.
- Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt oder die Flasche beschädigt ist.
- Bei Zimmertemperatur aufbewahren.
- Nach dem Verfallsdatum das Produkt nicht mehr verwenden.
- Die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschlossen halten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit einem Medikament oder einem anderen Produkt, das auf die Augenoberfläche aufgebracht wird, ohne dies vorher mit Ihrem Arzt/Augenarzt zu besprechen, da die Wirkung beider Mittel dadurch verändert werden könnte.

Datum der letzten Neubearbeitung: 06/2018.

Larmisoft ist eine Marke von Febelcare.

Larmisoft

Eveneens beschikbaar in het gamma: Larmisoft Geïrriteerde ogen. Aussi disponible dans la gamme: Larmisoft Irritation oculaire. Auch erhältlich: Larmisoft Augenreizungen.



AVIZOR S.A.
La cañada 13-17
28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid (SPAIN)

Verdeeld door/Distribué par/Vertrieben von:
Axone Pharma nv/sa
Boulevard de France 9A
1420 Braine-l'Alleud
Belgium

STERILE A i CE 0318

MD

AP-0251-V01

400 mm