

Código: PROS1189	Edición: PROS1189	Fecha: 06/04/2022
Modelo: Larmisoft Irritation Ocular		
Doc IU: DOC-DIS/0592	Edición: 2	FURIU: 2017/03
Ref Troquel: TRO-PROST-013		Dimensiones: 400 x 150 mm
Tríptico: NA		

Colores:







Aprobación:

Diseño y Comunicación
Asuntos regulatorios

PROS1189

Larmisoft GEÏRRITEERDE OGEN

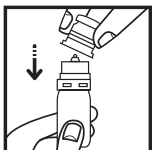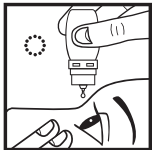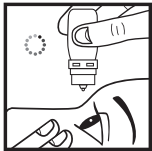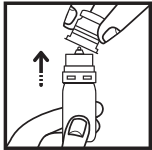

VERLICHT DE SYMPTOMEN VAN OOGIRRITATIE.

Voor gebruik met of zonder contactlenzen.

Conserveermiddelvrij - Fosfaatvrij - Aloë vera & hypromellose 0,2%.
Hydraterende oogdruppels om de symptomen van oogirritatie te verlichten.

SAMENSTELLING:

Aloë vera, hypromellose 0,2%, essentiële elektrolyten (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) in waterige, gebufferde, isotone oplossing.

ZONDER CONSERVEERMIDDELEN.
CONSERVEERMIDDEL- & FOSFAATVRIJ.

GEBRUIK:

LARMISOFT Geïrriteerde ogen is een conserveermiddelvrij product voor multidosering, speciaal bestemd voor het verlichten van de symptomen van milde oogirritaties door verontreiniging, droge of stoffige omgevingen, rook, verlengd gebruik van contactlenzen, gechloreerd water (zwembaden) en andere irriterende stoffen. Het is ook aangewezen voor de bevochtiging en lubrificëring van contactlenzen. Voor de dragers van contactlenzen biedt het een uitstekende lubrificëring, wat het indoen van de lens vergemakkelijkt, het visueel comfort verhoogt en het dragen van de lens verbetert. Dit product is compatibel met alle soorten contactlenzen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. Neem een fles **LARMISOFT Geïrriteerde ogen**, draai de verzegeling linksom en verwijder de beschermdop.

Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meermalen.

Gebruik met contactlenzen: één of twee druppels op de binnenkant van beide lenzen druppelen alvorens deze op het oog te plaatsen.

De beschermdop na iedere toediening terugplaatsen. Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag.





VOORZORGSMATREGELEN:

- Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen.
- Als u oogirritatie of een bijwerking ondervindt, gelieve een specialist te raadplegen.
- Als de fles eenmaal is geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de punt van de fles niet met de ogen of enig ander oppervlak in aanraking komt, om besmetting te voorkomen.
- Niet in de fles knippen met de beschermdop erop.
- Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt, of wanneer de fles is beschadigd. Het product bij kamertemperatuur bewaren.
- Het product niet gebruiken na de vervaldatum.
- Het product niet gebruiken in combinatie met een farmacologische behandeling of andere producten die op het oogoppervlak worden aangebracht, omdat de werking van beide mogelijk wordt beïnvloed.
- Na elk gebruik de fles zorgvuldig sluiten.

Datum van laatste herziening: 03/2017.

Larmisoft is een Febelcare-merk.

Larmisoft IRRITATION OCULAIRE

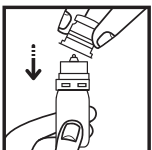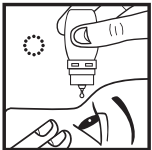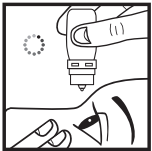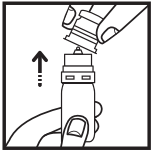

POUR LE SOULAGEMENT DES SYMPTÔMES DE L'IRRITATION OCULAIRE.

Utilisation avec ou sans lentilles de contact.

Sans conservateur - Sans phosphate - Aloe vera et hypromellose 0,2 %.
Gouttes hydratantes pour le soulagement des symptômes de l'irritation oculaire.

COMPOSITION :

Aloe vera, hypromellose 0,2%, électrolytes essentiels (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) en solution aqueuse, tamponnée et isotonique.

SANS CONSERVATEUR.
SANS CONSERVATEUR ET SANS PHOSPHATE.

USAGE:

LARMISOFT Irritation oculaire est un produit multidose sans conservateur indiqué spécialement pour soulager les symptômes d'irritation oculaire légère, provoquée par la pollution, les environnements secs ou poussiéreux, la fumée, le port prolongé de lentilles de contact, l'eau chlorée (piscines) et autres agents irritants. Il est également indiqué pour humidifier et lubrifier les lentilles de contact. Pour les porteurs de lentilles de contact, il permet une excellente lubrification et facilite la pose des lentilles, tout en améliorant le confort visuel et le port de celles-ci. Ce produit est compatible avec tous les types de lentilles de contact.

MODE D'EMPLOI :

Se laver et se rincer les mains puis les sécher avant utilisation.

Prendre un flacon de **LARMISOFT Irritation oculaire**, retirer le sceau de sécurité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlever l'embout de protection.

Utilisation directe : Verser une à deux gouttes dans chaque œil et cligner des yeux plusieurs fois.

Utilisation avec des lentilles de contact : Verser une à deux gouttes sur la surface interne de chaque lentille avant de la placer sur l'œil.

Replacer l'embout de protection après chaque usage. Utiliser le produit selon vos besoins, jusqu'à 8 fois par jour.

150 mm

400 mm

Código: PROS1189	Edición: PROS1189	Fecha: 06/04/2022
Modelo: Larmisoft Irritation Ocular		
Doc IU: DOC-DIS/0592	Edición: 2	FURIU: 2017/03
Ref Troquel: TRO-PROST-013		Dimensiones: 400 x 150 mm
Tríptico: NA		

Colores:



Aprobación:

Diseño y Comunicación
Asuntos regulatorios


150 mm

PRÉCAUTIONS :

- Ne pas ingérer la solution, et la garder hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit en cas d’allergie à l’un de ses composants.
- En cas d’irritation oculaire ou d’effet indésirable, consulter un spécia- liste.
- Une fois le flacon ouvert, le délai d’utilisation est de 90 jours maxi- mum.
- Assurez-vous que le bout du flacon n’entre pas en contact avec les yeux ou avec toute autre surface, afin d’éviter la contamination.
- Ne pas presser le flacon si l’embout de protection est en place.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est endommagé ou manquant, ou si le flacon est endommagé.
- Conserver le produit à température ambiante.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
- Ne pas utiliser le produit avec un traitement pharmaceutique ou tout autre produit appliqué sur la surface oculaire, afin d’éviter toute interaction médicamenteuse.
- Bien refermer le flacon après chaque usage.

Date de la dernière révision : 03/2017.
Larmisoft est une marque Febelcare.

Larmisoft
AUGENREIZUNGEN

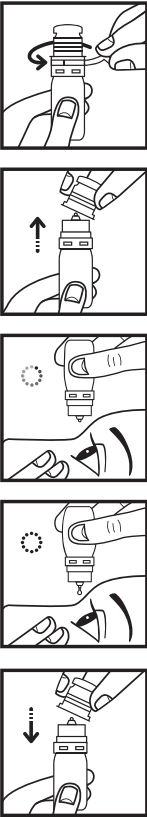

ZUR LINDERUNG DER SYMPTOME VON AUGENREIZUNGEN.
Zum Gebrauch mit oder ohne Kontaktlinsen.
Ohne Konservierungsstoffe - Ohne Phosphat - Aloe vera & Hypromel- lose 0,2 %.
Feuchtigkeitsspendende Tropfen zur Linderung der Symptome von Augenreizungen.

Zusammensetzung:
Aloe vera, Hypromellose 0,2%, essentielle Elektrolyte (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) in wässriger, gepuffter und isotonischer Lösung.
OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE.
OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE UND PHOSPHAT.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
LARMISOFT Augenreizungen ist ein Produkt zur Anwendung in mehreren Dosen ohne Konservierungsstoffe zur Linderung der Symptome leichter Augenreizungen durch Kontamination, ein trockenes oder staubiges Umfeld, Rauch, zu langes Tragen von Kontaktlinsen, mit Chlor behandeltes Wasser (Schwimmbecken) und andere reizende Substanzen. Es ist auch zur Benetzung und Befeuchtung von Kontaktlinsen indiziert. Für Kontaktlinsenträger sorgt es für eine hervorragende Befeuchtung, was das Einsetzen der Linse erleichtert sowie den Sehkombfort und das Tragen der Linse verbessert. Dieses Produkt ist mit allen Arten von Kontaktlinsen kompatibel.

ANWENDUNG:
Vor dem Gebrauch des Produktes die Hände waschen, abspülen und abtrocknen.
Gegen den Uhrzeigersinn am Sicherheitssiegel einer Flasche LARMISOFT Augenreizungen ziehen und die Schutzkappe entfernen.
Direkte Anwendung: Einen oder zwei Tropfen auf jedes Auge träufeln und mehrmals blinzeln.
Anwendung mit Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen der Linsen einen oder zwei Tropfen auf die Innenseite jeder Linse träu- feln.

Nach jeder Verwendung die Schutzkappe wieder aufsetzen. Das Produkt nach Bedarf bis zu 8-mal täglich verwenden.

- WARNHINWEISE:
- Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Produkt bei Allergien gegen einen der Bestandteile nicht verwen- den.
 - Wenn Nebenwirkungen oder Beschwerden auftreten, einen Spezia- listen aufsuchen.
 - Nach dem Öffnen der Flasche das Produkt maximal 90 Tage lang verwenden.
 - Achten Sie darauf, dass die Flaschenspitze nicht mit den Augen oder anderen Oberflächen in Kontakt kommt, um eine Kontamination zu vermeiden.
 - Nicht auf die Flasche drücken, wenn die Schutzkappe aufgesetzt ist.
 - Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt oder die Flasche beschädigt ist.
 - Bei Zimmertemperatur aufbewahren.
 - Nach dem Verfallsdatum das Produkt nicht mehr verwenden.
 - Nicht in Kombination mit anderen pharmakologischen Behan- dlungen oder Produkten zur Anwendung auf der Augenoberfläche verwenden, um zu vermeiden, dass ihre Wirkung gegenseitig beein- flusst wird.
 - Die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschlossen halten.

Datum der letzten Neubearbeitung: 2017/03.
Larmisoft ist eine Marke von Febelcare.

AVIZOR S.A.
La cañada 13-17
28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid (SPAIN)

Verdeeld door/Distribué par/Vertrieben
von: Axone Pharma nv/sa
Boulevard de France 9A
1420 Braine-l’Alleud
Belgium

Larmisoft

Eveneens beschikbaar in het
gamma: Larmisoft Droge ogen.
Aussi disponible dans la
gamme: Larmisoft Yeux secs.
Auch erhältlich:
Larmisoft Trockene Augen.



AP-0255-V01

400 mm